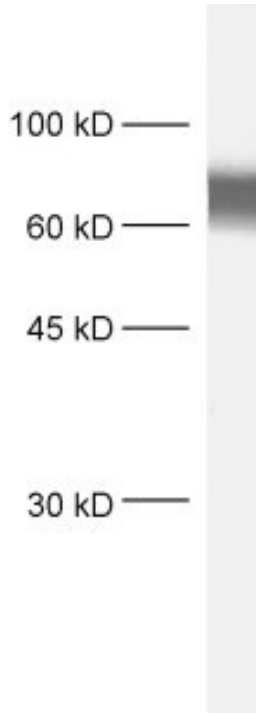
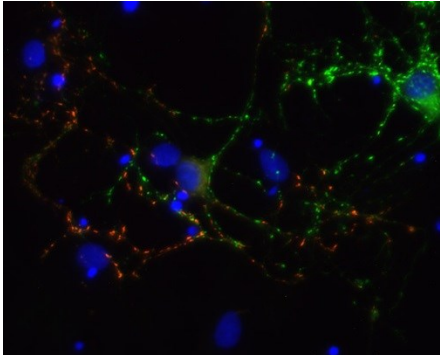
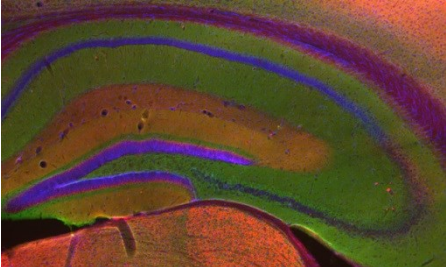
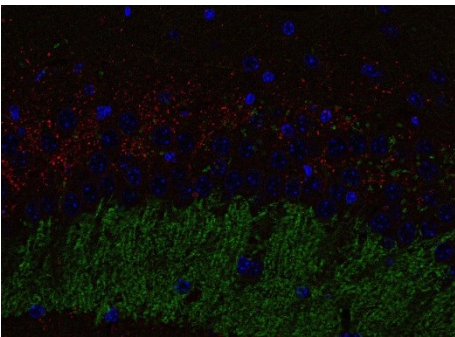


VGLUT2 monoclonal mouse purified IgG (品番: 135 421)

			
WB	ICC	IHC	IHC-P

抗体希釈: 1:1000
サンプル: ラット脳 シナプス小胞分画(LP2)

PFA固定ラット海馬ニューロンの間接免疫染色
Anti-VgluT 2 (希釈 1:500, 赤)
Rabbit anti-VgluT 1
(品番: 135 303 希釈 1:1000, 緑)
核はDAPIで可視化(青)

PFA固定マウス海馬切片の間接免疫蛍光標識
Anti-VgluT 2 (希釈 1:200, 赤)
Rabbit anti-VgluT 1
(品番: 135 303, 希釈 1:500, 緑)
核はDAPIで可視化(青)

PFA固定パラフィン包埋マウス海馬切片の間接免疫染色
Anti-VgluT 2 (希釈 1:500, 赤)
Rabbit anti-ZnT3
(品番: 197 003, 希釈 1:500, 緑)
核はDAPIで可視化(青)