

動物疾患関連ラピッドテスト

FASTest®


獣医学研究向けの迅速免疫クロマトグラフィーテストキットです。病原体の検出など、動物疾患関連の測定項目に対応しています。ネコ、イヌのほか、鳥/家禽や爬虫類なども含む動物用の製品があります。



<https://filgen.jp/Product/Bioscience4/Megacor/index.html>

検出原理

陽性検体には、体外抗原や抗体が含まれています。これらは、コンジュゲートパッドの領域で、特異的な抗原-抗体複合体を形成します。この抗原-抗体複合体は、メンブレン上を移動（ラテラルフロー）します。そして、メンブレンに固定された抗体や組換え抗原に結合し、テストラインを形成します。コントロールラインが表示されることで、検査が正しく行われたことを確認できます。

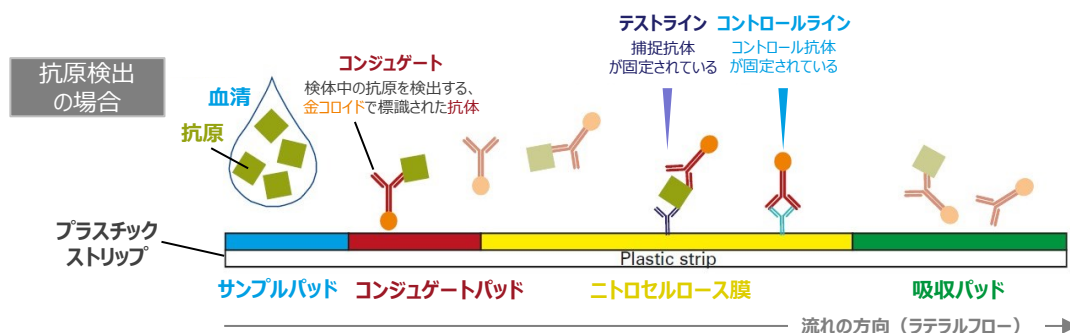

ネコ用

品名（検出項目）	容量	品番
FASTest® FCoV Strip （猫コロナウイルス抗原検出）	10ディップスティック	670010RG1
FASTest® FeLV （猫白血病ウイルス抗原検出）	10カセット	950010RG1
	25カセット	950025RG1
	50カセット	950050RG1
FASTest® FeLV LabSet （猫白血病ウイルス抗原検出）	120ディップスティック	950120RG1
FASTest® FeLV-FIV （猫白血病ウイルス抗原/猫免疫不全ウイルス抗体検出）※2項目検出	15カセット	761015RG1
	25カセット	761025RG1
	50カセット	761050RG1
FASTest® FIP （猫コロナウイルス（FCoV/FIPV）抗体検出）	10カセット	990010RK1
	25カセット	990025RK1
FASTest® FIV （猫免疫不全ウイルス抗体検出）	10カセット	960010RK1
	25カセット	960025RK1
FASTest® FIV LabSet （猫免疫不全ウイルス抗体検出）	60ディップスティック	960060RK1

イヌ用		
品名（検出項目）	容量	品番
FASTest® ANAPLASMA-EHRlichia （アナプラズマ属 & エーリキア・カニス抗体検出）※2項目検出	10カセット	601010RK1
	50カセット	601050RK1
FASTest® BRUCELLA canis （ブルセラ・カニス抗体検出）	10カセット	800010RK1
FASTest® CCoV Strip （犬コロナウイルス 抗原検出）	10ディップスティック	810010RG1
FASTest® CDV Ab （犬ジステンパーウイルス抗体検出）	10カセット	770010RK1
FASTest® CDV-CPV Ab （犬ジステンパーウイルス & 犬パルボウイルス抗体検出）※2項目検出	10カセット	821010RK1
FASTest® CPV Ab （犬パルボウイルス抗体検出）	10カセット	820010RK1
	10カセット	760010RE1
FASTest® CRP canine （C反応性タンパク質検出）	25カセット	760025RE1
	6カセット	975006RK1
FASTest® CVBD 4T （アナプラズマ属、エーリキア・カニス、リーシュマニア・インファンタム、およびデロフィラリア・イミティス 検出）※4項目検出	15カセット	975015RK1
	25カセット	975025RK1
	50カセット	975050RK1
FASTest® DISTEMPER Strip （犬ジステンパーウイルス抗原検出）	10ディップスティック	830010RG1
FASTest® EHRlichia canis （エーリキア・カニス抗体検出）	10カセット	910010RK1
	50カセット	910050RK1
FASTest® EHRlichia-LEISH （エーリキア・カニス & リーシュマニア・インファンタム抗体検出）※2項目検出	6カセット	915006RK1
	15カセット	915015RK1
	25カセット	915025RK1
	50カセット	915050RK1
FASTest® FOBT canine （犬ヘモグロビン検出）	5カセット	945005RG1
	10カセット	945010RG1
	25カセット	945025RG1
FASTest® LEISH （リーシュマニア・インファンタム抗体検出）	10カセット	970010RK1
	25カセット	970025RK1
	50カセット	970050RK1
FASTest® LYME （スピロヘータ科のライム病ボレリア抗体検出）	10カセット	940010RK1

ウシ用		
品名（検出項目）	容量	品番
FASTest® BCV Strip （牛コロナウイルス 抗原検出）	10ディップスティック	890010RG1
FASTest® D4T bovine （牛コロナウイルス（BCV）、クリプトスポリジウム・パルバム、大腸菌K99（F5）、ロタウイルス 抗原検出）	10テストチューブ	083010RG1
	25テストチューブ	083025RG1
FASTest® E.coli-K99 Strip （大腸菌 ssp. K99（F5）抗原検出）	10ディップスティック	840010RG1

その他動物種用			
品名（検出項目）	容量	品番	適用動物種
FASTest® ENCEPH (エンセファリトゾーン・クニクリ抗体検出)	6カセット	825006RK1	ウサギ
	25カセット	825025RK1	
FASTest® BEE 3T (奇形ウイルス(DWV)/急性麻痺ウイルス(ABPV)/サックブルードウイルス検出)	10×3ディップスティック	301010BG1	ミツバチ/ミツバチの幼虫
	25×3ディップスティック	301025BG1	
	50×3ディップスティック	301050BG1	
FASTest® BOR in TICK (ボレリア抗原検出)	5カセット	873005RG1	ダニ

複数種用			
品名（検出項目）	容量	品番	適用動物種
FASTest® ANAPLASMA (アナプラズマ・ファゴサイトフィルム & アナプラズマ・ブラティス抗体検出)	10カセット	600010RK1	イヌ、ウマ
FASTest® C. diff 2T (GDH & クロストリジオイデス・ディフィシル毒素A/B抗原検出)	10テストチューブ	796010RG1	ブタ、イヌ、ネコ、ウマ
FASTest® C. perfringens Toxin (クロストリジウム パーフリンジェンス エンテロトキシン検出)	10ディップスティック	795010RG1	ウマ、ウシ、ヤギ、ヒツジ、ブタ、イヌ、ネコ
FASTest® CRYPTO Strip (クリプトスポリジウム属抗原検出)	10ディップスティック	870010RG1	ネコ、ウシ、モルモット、ブタ、モルモット、ブタ、ハリネズミ、爬虫類、イヌ、ヤギ、ヒツジ、ウマ、鳥/家禽、ウサギ、ミンク
FASTest® CRYPTO-GIARDIA Strip (クリプトスポリジウム属 & ジアルジア・デュオデナリス抗原検出)	10ディップスティック	740010RG1	ウシ、イヌ、ネコ、ウサギ、ブタ、ヒツジ、ヤギ、ウマ、モルモット、ハリネズミ、鳥/家禽、爬虫類、ミンク
	25ディップスティック	740025RG1	
FASTest® CRYPTO-ROTA D2T (クリプトスポリジウム属 & ロタウイルス抗原検出)	10テストチューブ	780010RG1	ハリネズミ、イヌ、ネコ、ウマ、ウシ、ヤギ、ヒツジ、ブタ、モルモット、ウサギ、爬虫類、鳥/家禽、ミンク
FASTest® D-PHYTE Strip (獣医関連の皮膚糸状菌属検出)	10ディップスティック	764010RG1	ヤギ、鳥/家禽、ハリネズミ、ネコ、イヌ、モルモット、ウマ、ウサギ、ミンク、爬虫類、ヒツジ、ブタ、ウシ
FASTest® GIARDIA Strip (ジアルジア・デュオデナリス抗原検出)	10ディップスティック	850010RG1	イヌ、ネコ、モルモット、ハリネズミ、鳥/家禽、ウマ、爬虫類、ウサギ、ミンク、ウシ、ヤギ、ヒツジ、ブタ
	25ディップスティック	850025RG1	
FASTest® NEOSPORA caninum (ネオスポラ・カニナム抗体検出)	10カセット	836010RK1	イヌ、ウシ、シカ
FASTest® PARVO Card (パルボウイルス抗原検出)	15カセット	925015RG1	イヌ、ネコ、ミンク
FASTest® PARVO Strip (パルボウイルス抗原検出)	10ディップスティック	920010RG1	イヌ、ネコ、ミンク
	25ディップスティック	920025RG1	
FASTest® ROTA Strip (ロタウイルスA群抗原検出)	10ディップスティック	930010RG1	イヌ、ウシ、ウマ、ブタ、ウサギ、ネコ、ヤギ、ヒツジ、ハリネズミ、モルモット、鳥/家禽、爬虫類、ミンク、シカ
FASTest® SAA (血清アミロイドA検出)	10カセット	710010RE1	ネコ、ウマ
	25カセット	710025RE1	
FASTest® HW Antigen (デロフィラリア・イミティス抗原検出)	10カセット	980010RG1	イヌ・ネコ
	25カセット	980025RG1	
	50カセット	980050RG1	

- 本誌掲載のサービス、製品は医療用ではなく、研究用に限定して販売しています。医療品の製造、品質管理、各種診断、治療には使用しないでください。
■ サービスや製品の名称、仕様、プロトコルなどは改良などの理由から予告なしに変更される場合がありますので、予めご了承ください。

Filgen  **フィルジェン株式会社**

【お問い合わせ】 試薬機器部

TEL : 052-624-4388 E-mail : support@filgen.jp

URL : <https://filgen.jp/>

代理店